


## FALLSCHUTZMATTE SÉCURFORM

Artikel-Nr

07.2900

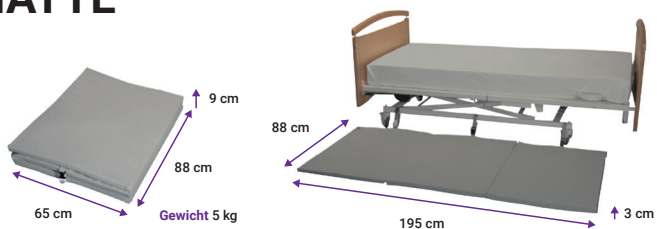

### Vorteile :

Die Fallschutzmatte Securform wird genutzt um Verletzungen aufgrund von Stürzen aus dem Bett zu verhindern.

#### Optimaler Schutz

- ▶ 60% des Aufpralls werden abgefangen
- ▶ Verbindungsriemen mit dem Bett garantieren die richtige Lage
- ▶ Antirutsch-Unterseite
- ▶ Großer Abdeckungsbereich am Boden: 195 cm x 88 cm
- ▶ Großer Komfort dank des Pharmatex-Bezugs und des viskoelastischen Schaumstoffs Gute Stabilität im Stehen, das ein Aufstehen des Patienten ermöglicht und ihn gleichzeitig im Falle eines Sturzes schützt.

#### Komfort für die Pflegepersonen

- ▶ Ermöglicht den Pflegepersonen einen direkten Zugang zum Patienten, ohne die Fallschutzmatte zu heben oder zu entfernen
- ▶ Nur 3 cm Höhe, um die Risiken von Stolpern und Anstoßen zu begrenzen
- ▶ Bezug abzieh- und maschinenwaschbar
- ▶ Rasches Anbringen, leicht zu verstauen und transportieren dank der Kompaktheit und des Schnellverschlusses

#### Tipps zur Installation

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Gurte an einem festen Teil des Bettes positioniert sind
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Richtung installiert sind



#### Warnungen

- ▶ Betreten Sie den Teppich nicht mit hochhackigen Schuhen
- ▶ Stolpergefahr bei Verlegung der Matte auf dem Boden
- ▶ Lassen Sie den Patienten nicht zu lange auf dem Teppich liegen
- ▶ Unsachgemäße Montage der Bänder kann die Matte beschädigen
- ▶ Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Patient niedergelassen ist, zu melden sind.

### Zusammensetzung

- ▶ Viskoelastischer Schaumstoff RG 80 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Bezug-Oberseite 60% Polyurethan, 40% Polyester
- ▶ Bezug-Unterseite 57% polyurethane, 43% polyester
- ▶ Schnallen: 100 % Acetal
- ▶ Riemen: 100 % Polypropylen

### Reinigungshinweise

- ▶ Schaumstoffs mit Sättigungsdampf ohne Hinzufügen von Formalin, mit geeigneten Desinfektionsmitteln oder Seifenwasser. Gut an der Luft trocknen lassen.

▶ Bezug :



Maschinentrocknen bei mäßiger Temperatur (60 °C) möglich

Achtung: Der Schutzbezug darf erst dann wieder angebracht werden, wenn der Schaumstoff vollständig trocken ist.

### Entsorgen des Medizinprodukts

Das Medizingerät darf nicht in der Natur entsorgt werden und muss in einem Recycling-Center entsorgt werden.

### Storage



### Garantie


2 Jahre für etwaige Herstellungsfehler.



## TAPIS D'AMORTISSEMENT SÉCURFORM

Référence

07.2900

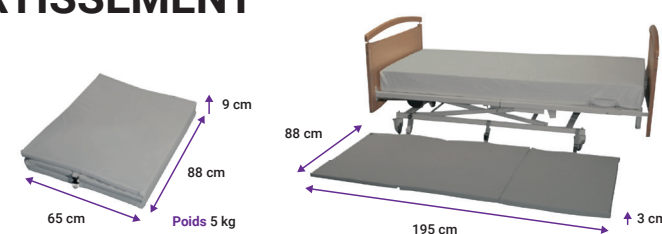

### Principes d'utilisation :

Le matelas Securform s'utilise pour prévenir les blessures liées aux chutes du lit.

#### Sécurité optimum

- ▶ 60% de l'impact amorti
- ▶ Lanières de liaison avec le lit pour garantir le bon positionnement
- ▶ Dessous antiglisse
- ▶ Grande zone de couverture au sol : 195 cm x 88 cm
- ▶ Très bon confort : Grâce au Pharmatex et à la mousse viscoélastique
- ▶ Excellente stabilité en position debout qui permet de lever le patient tout en le protégeant en cas de chute

#### Confort des aidants

- ▶ Permet aux aidants de ne plus enlever le tapis pour accéder au patient
- ▶ Seulement 3 cm de hauteur afin de limiter les risques de «croche-pieds»
- ▶ Déhoussable et lavable en machine
- ▶ Rapide à installer, facile à ranger et à transporter grâce à sa compacité et son clip de fermeture

#### Conseils d'installation

- ▶ Bien veiller à positionner les sangles sur une partie fixe du lit
- ▶ S'assurer du bon sens d'installation



#### Mises en garde

- ▶ Ne pas marcher sur le tapis avec des chaussures à talons
- ▶ Risques de croche-pieds lorsque le tapis est installé au sol
- ▶ Ne pas laisser durablement la personne sur le tapis
- ▶ Une mauvaise installation des sangles risque d'abîmer le tapis
- ▶ Tout incident grave avec ce dispositif médical doit faire l'objet d'une remontée au fabricant et à l'autorité compétente du pays où le patient est établi.

### Composition

- ▶ Mousse : Polyuréthane Viscoélastique 80g/m<sup>3</sup> Classement au feu M4
- ▶ Housse : Pharmatex 60% Polyuréthane, 40% Polyester Classement au feu CRIB 5
- ▶ Tissu anti-glisse : 57% Polyuréthane, 43% Polyester
- ▶ Boucles : 100% Acétal
- ▶ Sangles : 100% Polypropylène

### Entretien

- ▶ Le matelas Securform est déhoussable
- ▶ Mousse : Eponge et eau savonneuse
- ▶ Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol
- ▶ Housse :



Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps

La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche

### Elimination du dispositif médical

Le dispositif médical abîmé ou défectueux ne peut être jeté dans la nature et doit être déposé en déchetterie.

### Stockage




### Garantie

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien et dans la limite d'un usage approprié.

## FALL PROTECTION MAT SÉCURFORM

### Reference

07.2900

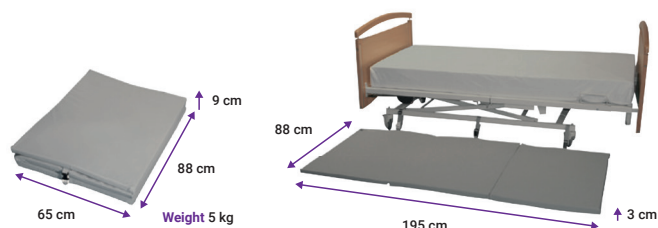

### Benefits :

The mat Securform mat prevents the patient from injuries in case of bed falling.

#### Optimum safety

- ▶ It absorbs up to 60% of the impact from a fall
- ▶ Retaining straps for a good positioning along the bed
- ▶ Anti-slip bottom layer
- ▶ Wide coverage area on the ground: 195 cm x 88 cm
- ▶ Comfortable thanks to the viscoelastic foam and the pharmatex cover
- ▶ Excellent stability on the floor which allows to raise the patient in complete safety

#### Comfort for caregivers

- ▶ Allows the caregivers not to remove the carpet any more
- ▶ Only 3 cm height to prevent the risk of falling
- ▶ Cover is removable and machine washable
- ▶ Easy use, storage and carrying

#### Installation tips

- ▶ Insure that the straps are positioned on a fixed part of the bed
- ▶ Make sure that they are installed in the right direction



#### Warning

- ▶ Do not walk on the carpet with high-heeled shoes
- ▶ Risks of tripping when the mat is installed on the floor
- ▶ Do not leave the patient on the carpet for a too long time
- ▶ Improper installation of the straps can damage the mat
- ▶ Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the patient is established.

### Composition

- ▶ Viscoelastic foam polyurethane 80 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Cover in pharmatex 60% polyurethane, 40% polyester
- ▶ Anti-slip bottom layer: 57% polyurethane, 43% polyester
- ▶ Buckles: 100% Acetal
- ▶ Straps: 100% Polypropylene

### Cleaning

- ▶ Foam : saturated steam cleaning without formol, disinfectant product or sponge and soapy water.

▶ Cover :



Recommended up to 60°C

Well dry in the open air. Important : The mattress pad or the protective cover must be replaced once the foam thoroughly dry.

### Disposal of the medical device

The medical device must not be discarded in nature and must be disposed of in a recycling center.

### Storage



### Warranty


2 years warranty against any manufacturing defect.



## SHOCKDEMPENDE MAT SÉCURFORM

### Referentie

07.2900

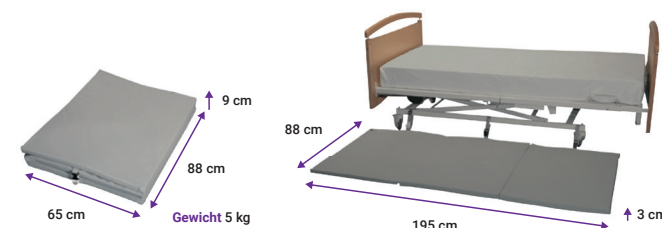

### Voordelen:

De schokdempende mat Securform wordt gebruikt om verwondingen te voorkomen als gevolg van uit het bed vallen.

#### Optimale veiligheid

- ▶ 60% van de impact gedempt
- ▶ Met riemen bevestigd aan het bed om goede plaatsing te garanderen
- ▶ Anti-slip onderkant
- ▶ Bedekt een groot vloeroppervlak : 195 cm x 88 cm
- ▶ Zeer comfortabel: dankzij het Pharmatex en het visco-elastische schuim
- ▶ Uitstekende stabiliteit in staande positie waardoor het mogelijk is de patiënt op te tillen en hem te beschermen als hij valt.

#### Comfort voor de verzorgenden

- ▶ De verzorgenden hoeven de mat niet weg te halen om bij de patiënt te komen
- ▶ Slechts 3 cm hoog om de kans op struikelen te beperken
- ▶ Afneembare hoes, machinewasbaar
- ▶ Snel te installeren, gemakkelijk op te bergen en te vervoeren dankzij de compactheid en de sluitclip.
- ▶ Eenvoudig te gebruiken, op te bergen en mee te nemen

#### Installation tips

- ▶ Zorg ervoor dat de riemen op een vast deel van het bed worden geplaatst
- ▶ Zorg ervoor dat ze in de juiste richting zijn geïnstalleerd



#### Waarschuwingen

- ▶ Loop niet op het tapijt met schoenen met hoge hakken
- ▶ Risico op struikelen wanneer de mat op de vloer is geïnstalleerd
- ▶ Laat de patiënt niet te lang op het tapijt liggen
- ▶ Onjuiste installatie van de riemen kan de mat beschadigen
- ▶ Een bericht aan de gebruiker en/of de patiënt dat elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.

### Samenstelling

- ▶ Visco-elastisch schuim polyurethaan 80 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Bovenkant hoes van pharmatex 60% Polyurethaan, 40% Polyester
- ▶ Anti-slip onderkant hoes 57% PVC, 43% polyester
- ▶ Gespen: 100% Acetaal
- ▶ Riemen: 100% Polypropyleen

### Onderhoud

- ▶ Schuim : Reiniging met verzadigde damp zonder toevoeging van formol, desinfectiemiddel of zeepsop. Goed laten drogen aan de open lucht.

▶ Hoes :



Aanbevolen tot 60°C

Belangrijk : Het deksel van de bescherming in Pharmatex moet worden vervangen nadat het goed droog schuim.

### Verwijdering van het medische hulpmiddel

Het medisch hulpmiddel mag niet in de natuur worden weggegooid en moet worden afgevoerd naar een recyclingcentrum.

### Opslag



### Garantie

Op dit product wordt 2 jaar garantie gegeven tegen fabricagefouten.

